



	Page		Page
BLEPHAROSTATS	1 - 2	SPECULUMS	1 - 2
RELEVEURS	2	RETRACTORS	2
PLAQUE A PAUPIERES	2	LID PLATE	2
ECARTEUR	2	RETRACTOR	3
COUTEAUX	3	KNIVES	3
AIGUILLE A CORPS ETRANGERS	3	SPUD	3
PORTE-LAMES	3	BLADE BREAKERS	3
TREPANS	4	TREPHINES	4
CURETTES	4	CURETTES	4
SPATULES	5	SPATULAS	5
CROCHETS	5 - 7	HOOKS	5 - 7
DIVERS	8	MISCELLANEOUS	8
CISEAUX	9 - 12	SCISSORS	9 - 12
KR	13	RK	13
CANULES	13 - 18	CANNULAS	13 - 18
PINCES	19 - 24	FORCEPS	19 - 24
PORTE-AIGUILLES	25 - 27	NEEDLE-HOLDERS	25 - 27
BOITES DE STERILISATION	28	STERILIZING TRAYS	28
VOIES LACRYMALES	29	LACRIMAL INSTRUMENTS	29
DCR	30	DACRYOLOGY	30
COUTEAUX DIAMANT HUCO®	31	HUCO® DIAMOND KNIVES	31



CLEANING AND MAINTENANCE OF FCI® SURGICAL INSTRUMENTS

FCI® surgical instruments are shipped NON STERILE.
THEY MUST BE DECONTAMINATED, CLEANED AND STERILIZED BEFORE EACH USE.

Our recommendations for the cleaning of our stainless steel and titanium surgical instruments are as follows:

Rinsing:

- remove blood and tissue immediately after use by rinsing with demineralized or distilled water

Decontamination:

- immerse the instrument in the decontaminating solution and follow the manufacturer's instruction
- avoid the use of chlorine that may corrode the stainless steel instruments

Chemical inactivation of non conventional transmittable agents:

- we recommend that the instruments are soaked in a 1N sodium hydroxide solution prepared with demineralized or distilled water for 60 minutes at 20°C / 66°F. This inactivation should be followed by a very careful soaking, until the pH value is neutral. The presence of residual sodium hydroxide on the instruments may cause corrosion during the sterilization. The presence of chlorine in tap water makes the sodium hydroxide solution corrosive, and therefore it is necessary to use demineralized or distilled water
- rinse the instrument carefully with demineralized water

Cleaning:

- clean the instrument following one of these processes:
 - mild soap solution and soft bristled toothbrush
 - ultrasonic procedure for at least 5 minutes
 - using a washing machine
- dry instrument quickly and completely

Sterilization (physical inactivation of non conventional transmittable agents):

- steam sterilization following a validated cycle according to your institution's standards (recommended parameters are: 18 minutes at 134°C / 293 °F, at 2 bars)
- take care to use an adapted sterilization box

Practical advice:

- treat the instruments made from different metals separately
- do not mix instruments in good condition with instruments that are corroded or damaged
- check the function and the cleanliness of each instrument after cleaning

Cleaning of HUCO® Diamond knives

HUCO® Diamond knives presented on page 31 require a special cleaning procedure. Follow the instructions for use.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX FCI®

Les instruments chirurgicaux FCI® sont livrés NON STERILES.
ILS DOIVENT ETRE DECONTAMINES, NETTOYES ET STERILISES AVANT CHAQUE UTILISATION.

Les recommandations pour l'entretien de nos instruments de chirurgie en **acier inoxydable** et en **titane** sont les suivantes :

Rincage :

- ne pas laisser sécher de sang ou de tissu sur l'instrument
- rincer l'instrument immédiatement après chaque utilisation avec de l'eau déminéralisée ou distillée

Décontamination :

- tremper l'instrument dans un bain décontaminant préparé selon les recommandations du fournisseur
- nous déconseillons l'utilisation de l'**hypochlorite de sodium**, ce décontaminant étant corrosif vis-à-vis de l'acier inoxydable

Inactivation chimique des Agents Transmissibles Non Conventionnels :

- nous recommandons l'utilisation d'une solution de soude 1N, préparée avec de l'eau déminéralisée, par trempage pendant 60 minutes à 20°C / 66°F. Cette inactivation doit être suivie d'un rinçage très soigneux jusqu'à ce que le pH du bain soit neutre. La présence de résidus de soude sur les instruments lors de la stérilisation est tenue responsable d'une corrosion importante. La présence d'ions chlorures dans les eaux de ville rend la solution de soude corrosive, d'où la nécessité d'utiliser de l'eau déminéralisée
- rincer soigneusement l'instrument avec de l'eau déminéralisée

Nettoyage :

- nettoyer l'instrument selon l'un de ces procédés :
 - avec une solution savonneuse et une brosse à poils souples
 - par un passage d'au moins 5 minutes au bac à ultrasons
 - en machine à laver
- sécher l'instrument rapidement et parfaitement

Stérilisation (inactivation physique des Agents Transmissibles Non Conventionnels) :

- stériliser l'instrument à l'autoclave selon un cycle validé (les paramètres recommandés sont 18 minutes à 134°C / 293°F, sous une pression de 2 bars)
- veiller à utiliser une boîte adaptée à ce mode de stérilisation

Conseils pratiques :

- traiter séparément les instruments fabriqués à partir de métaux différents
- ne pas mélanger des instruments en bon état avec d'autres corrodés ou abîmés
- vérifier les fonctions et la propreté de chaque instrument après nettoyage

Cas particuliers des Couteaux Diamant HUCO® :

Les couteaux diamant HUCO® présentés en page 31 nécessitent un entretien particulier. Nous vous conseillons de vous conformer aux indications données dans la notice les accompagnant.



BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER COLIBRI
5 mm (pour bébé)

A1-1000

BARRAQUER WIRE SPECULUM
5 mm (infant)

A1-1000



BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER COLIBRI
10 mm

A1-1010

BARRAQUER WIRE SPECULUM
10 mm

A1-1010

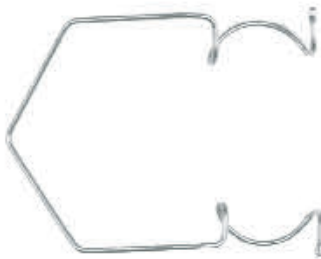


BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER COLIBRI
15 mm

A1-1020

BARRAQUER WIRE SPECULUM
15 mm

A1-1020



BLEPHAROSTAT POUR PHACO
Avec fenêtres ouvertes pour faciliter l'accès de la pièce à main phaco

A1-1030

WIRE SPECULUM FOR PHACO
With open blades for unobstructed access to the cataract incision with phaco tip

A1-1030

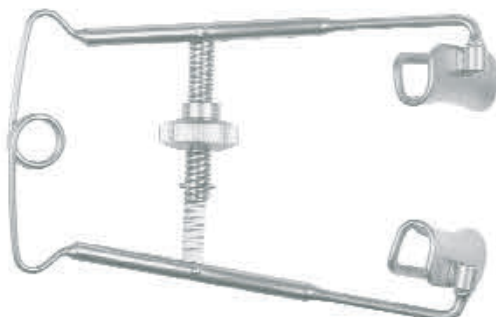


BLEPHAROSTAT DE CORCELLE

A1-1100

CORCELLE EYE SPECULUM

A1-1100



BLEPHAROSTAT DE PLEY

A1-1150

PLEY EYE SPECULUM

A1-1150

BLEPHAROSTAT
SPECULUM

BLEPHAROSTAT DE CASTROVIEJO **CASTROVIEJO EYE SPECULUM**

A1-1400

A1-1400

RELEVEURS
RETRACTORS
**RELEVEUR A PAUPIERES
DE DESMARRES**
DESMARRES LID RETRACTOR

10 mm

10 mm



A1-2010

A1-2010

**RELEVEUR A PAUPIERES
DE DESMARRES**
DESMARRES LID RETRACTOR

12 mm

12 mm



A1-2012

A1-2012

**RELEVEUR A PAUPIERES
DE DESMARRES**
DESMARRES LID RETRACTOR

14 mm

14 mm



A1-2014

A1-2014

**PLAQUE A
PAUPIERES**
**LID
PLATE**

PLAQUE A PAUPIERES DE JAEGER **JAEGER LID PLATE**

A1-2100

A1-2100

ECARTEUR
RETRACTOR
ECARTEUR DE BONN
Pour le DR
BONN RETRACTOR
Used in retinal detachment

A1-2210

A1-2210



COUTEAU CLIVEUR DE PAUFIQUE
6 mm
PAUFIQUE SCLEROTOME KNIFE
6 mm

A1-3406

A1-3406


5 mm
5 mm

A1-3405

A1-3405


AIGUILLE A C.E.
SPUD
AIGUILLE A CORPS ETRANGERS
FOREIGN BODY SPUD

A1-4000

A1-4000


PORTE-LAMES
BLADE BREAKERS

PORTE-LAME DE TROUTMAN
**TROUTMAN BLADE BREAKER
AND HOLDER**
Droit, 9 cm
Straight, 9 cm

A1-5000

A1-5000


LAMES DE RASOIR
RAZOR BLADES
Paquet de 10
Package of 10

A1-5040

A1-5040

MANCHE BISTOURI N° 3
PARKER HANDLE # 3

A1-6000

A1-6000


LAME BISTOURI N° 11
Pour A1-6000 (boîte de 100)
PARKER BLADE # 11
For A1-6000 (box of 100)

A1-6011

A1-6011



TREPANS

TREPHINES

TREPAN MODELE FCI

Pour poser la kératoprothèse.

Diamètre 4,5 mm

A1-7145

TREPHINE FCI TYP

For keratoprosthesis surgery

4.5 mm diameter

A1-7145

TREPAN MODELE FCI

Pour poser la kératoprothèse.

Diamètre 6,0 mm

A1-7160

TREPHINE FCI TYP

For keratoprosthesis surgery

6.0 mm diameter

A1-7160

CURETTES

CURETTES

CURETTE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD

A2-1101

J.A. BERNARD LACRIMAL CURETTE

A2-1101

CURETTE A CHALAZION DE MEYERHOEFER

Diamètre 1,5 mm ○

A2-1115

MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE

1.5 mm diameter ○

A2-1115

Diamètre 2,0 mm ○

A2-1120

2.0 mm diameter ○

A2-1120

Diamètre 2,5 mm ○

A2-1125

2.5 mm diameter ○

A2-1125

Diamètre 3,5 mm ○

A2-1135

3.5 mm diameter ○

A2-1135

CURETTE A EVISCERATION

A2-2200

EVISCERATION SPOON

A2-2200

SPATULES

SPATULAS

SPATULE A IRIS DE CULLER
Largeur 1 mm

CULLER IRIS SPATULA
1 mm wide

A2-3401

A2-3401



SPATULE DE BARRAQUER
Très fine - Longueur 12 mm

BARRAQUER SPATULA
Extremely delicate, length 12 mm

A2-3500

A2-3500



SPATULE DE CORNIC
Pour phacosection

CORNIC NUCLEUS VECTIS
*For small incision surgery
(phacosection)*

A2-3600

A2-3600



BISECTEUR DE TEYSSIER
Pour phacosection

TEYSSIER NUCLEUS BISECTOR
*For manual small incision surgery
(phacosection)*

A2-3720

A2-3720



CROCHETS

HOOKS

CROCHET A STRABISME DE GRAEFE

GRAEFE MUSCLE HOOK

A2-4010

A2-4010



CROCHET DE GASS ROUCHY
*Perforé pour passer les fils dans les
muscles pendant le DR*

GASS ROUCHY HOOK
Retinal detachment hook with hole

A2-4060

A2-4060



CROCHET A DR
Très court (10 cm)

RETINAL DETACHMENT HOOK
10 cm

A2-4070

A2-4070



CROCHET D'ARRUGA
Main droite
ARRUGA HOOK
Right hand


A2-4110

A2-4110

CROCHET D'ARRUGA
Main gauche
ARRUGA HOOK
Left hand


A2-4120

A2-4120

CROCHET DE GILLIES
Pour les paupières (grand)
GILLIES LID HOOK
Large


A2-4200

A2-4200

CROCHET DE GILLIES
Petit
GILLIES LID HOOK
Small


A2-4210

A2-4210


MICRO-CROCHET A IRIS DE BONN
Coudé, mousse
BONN MICRO IRIS HOOK
Blunt tip, angled


A2-4300

A2-4300


CROCHET BOUTON DE COL
Pour manipuler l'iris
COLLAR BUTTON HOOK
Micro-iris retractor


A2-4320

A2-4320


CROCHET DE SINSKEY
Pour manipuler l'implant
SINSKEY HOOK
Lens manipulating hook, angled


A2-4400

A2-4400


CROCHET DE SINSKEY MODIFIE CORNIC
Pour manipuler l'implant
SINSKEY CORNIC HOOK
Lens manipulating hook, angled


A2-4410

A2-4410



CROCHET DE JAFFE BECHERT
Pour manipuler le noyau pendant la phacoémulsification

JAFFE BECHERT HOOK
Lens nucleus rotator



A2-4500

A2-4500



MANIPULATEUR D'ARNEODO
Pour manipuler le noyau pendant la phacoémulsification

ARNEODO MICRO MANIPULATOR
For phacoemulsification



A2-4510

A2-4510



MANIPULATEUR DE LEBUISSON
Pour manipuler le noyau pendant la phacoémulsification

LEBUISSON MICRO MANIPULATOR
For phacoemulsification



A2-4520

A2-4520



CHOPPER
Pour phaco

PHACO CHOP
Pour phaco



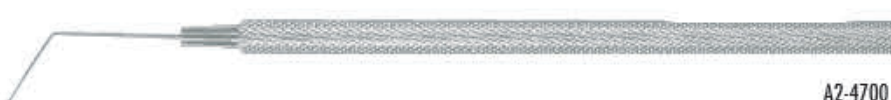
A2-4550

A2-4550



CROCHET DE LESTER
Pour manipuler l'implant

LESTER IOL MANIPULATOR
For lenses with or without holes



A2-4700

A2-4700

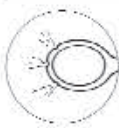
ANSE DE SNELLEN

SNELLEN LENS LOOP



A2-5000

A2-5000



ANSE IRRIGATRICE DE PEARCE

PEARCE IRRIGATING CANNULA



A2-5100

A2-5100


COMPAS DE CASTROVIEJO
20 mm

A2-6000

CASTROVIEJO CALIPER
20 mm spread

A2-6000


SERINGUE 3 ml

A2-7403

SYRINGE 3 ml

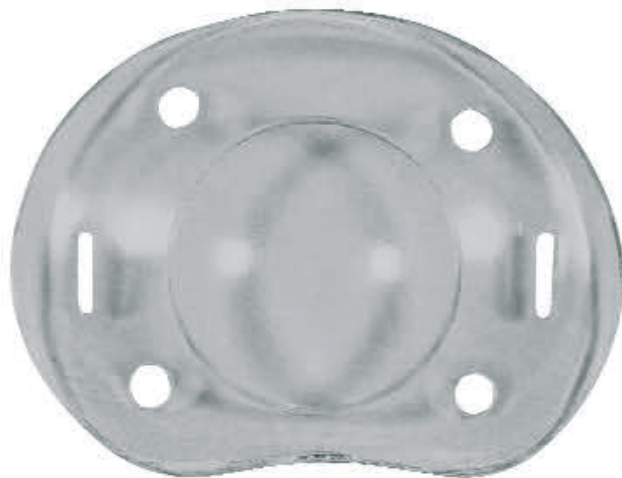
A2-7403


SERINGUE 5 ml

A2-7405

SYRINGE 5 ml

A2-7405


COQUE EN PLASTIQUE
Transparente

A2-7500

UNIVERSAL EYE SHIELD
Transparent

A2-7500


MARQUEUR POUR LE DR

A2-7710

**SCLERAL DEPRESSOR AND
 FIXATION PICK**
For retinal detachment

A2-7710


ASTIC-DISC
*Pour contrôler l'astigmatisme en per-
 opératoire*

A2-9000

ASTIC-DISC
*Intra-operative instrument for
 qualitative measurement of astigmatism*

A2-9000


CISEAUX DE BONN
9 cm, droit, mousse

A3-1000

BONN SCISSORS
9 cm, straight, blunt tips

A3-1000


CISEAUX DE BONN
9 cm, courbe, mousse

A3-1010

BONN SCISSORS
9 cm, curved, blunt tips

A3-1010


CISEAUX DE BONN
9 cm, droit, pointu

A3-1020

BONN SCISSORS
9 cm, straight, pointed tips

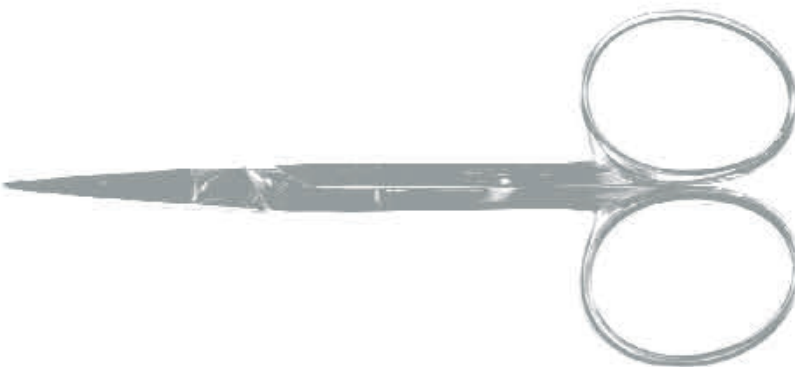
A3-1020


CISEAUX DE BONN
9 cm, courbe, pointu

A3-1030

BONN SCISSORS
9 cm, curved, pointed tips

A3-1030


CISEAUX D'OPHTALMOLOGIE
10,5 cm, droit, mousse

A3-1100

EYE SCISSORS
10.5 cm, straight, blunt tips

A3-1100


Courbe, mousse

A3-1110

Curved, blunt tips

A3-1110


Droit, pointu

A3-1120

Straight, pointed tips

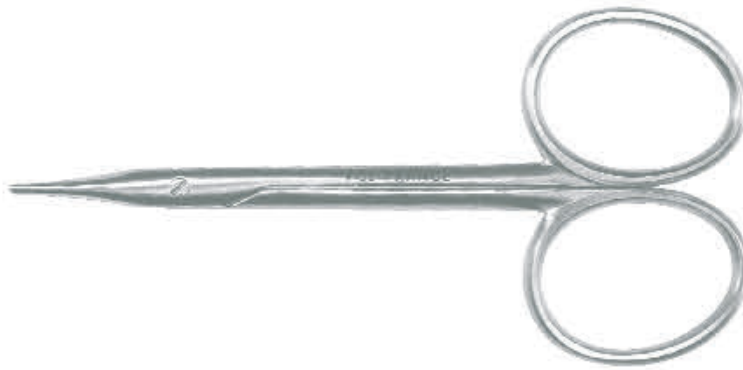
A3-1120


Courbe, pointu

A3-1130

Curved, pointed tips

A3-1130


CISEAUX DE SEVRIN STEVENS
*Tenotomie
Droit, mousse*

A3-1200

**SEVRIN STEVENS TENOTOMY
SCISSORS**
Straight, blunt tips

A3-1200


Courbe mousse

A3-1210

Curved, blunt tips

A3-1210


Droit, pointu

A3-1220

Straight, pointed tips

A3-1220


Courbe, pointu

A3-1230

Curved, pointed tips

A3-1230

CISEAUX A ENUCLEATION

A3-1300

ENUCLATION SCISSORS

A3-1300


**CISEAUX A IRIDECTOMIE DE
WECKER**
Mousse

A3-2000

WECKER IRIS SCISSORS
Blunt tips

A3-2000




CISEAUX A IRIDECTOMIE DE BARRAQUER
Lames mousses, 7 mm

A3-2010

BARRAQUER IRIS SCISSORS
7 mm long blades, blunt tips

A3-2010


CISEAUX DE WESTCOTT
*Ténotomie
Courbe, mousse*

A3-3000

WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS
Curved, blunt tips

A3-3000


CISEAUX DE CASTROVIEJO
Lames normales, mousse

A3-3100

CASTROVIEJO SCISSORS
Curved, blunt tips, regular blades

A3-3100


Lames petites, mousse

A3-3110

Blunt tips, small blades

A3-3110


CISEAUX DE KATZIN A LAMES INVERSEES
Lames normales, à droite

A3-3250

KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS
Standard blades, right

A3-3250


Lames normales, à gauche

A3-3260

Standard blades, left

A3-3260


CISEAUX DE KATZIN A LAMES INVERSEES
Micro lames, à droite

A3-3270

KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS
Blunt tips, small blades, right

A3-3270


Micro lames, à gauche

A3-3280

Blunt tips, small blades, left

A3-3280


CISEAUX DE VANNAS
Lames 8 mm, droit, mousse

A3-4000

VANNAS IRIS SCISSORS
8 mm blades, straight, blunt tips

A3-4000


Courbe, mousse

A3-4010

Curved, blunt tips

A3-4010


MICRO CISEAUX DE VANNAS
Lames 5 mm, droit, mousse

A3-4020

VANNAS SCISSORS
5 mm blades, straight, blunt tips

A3-4020


Courbe, mousse

A3-4030

Curved, blunt tips

A3-4030


CISEAUX A CAPSULE DE CORNIC
Courbe, lames ultra fines, 13 mm

A3-5000

CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS
Curved, extra thin 13 mm long blades

A3-5000


CISEAUX A CAPSULE DE LAFORGE CORNIC
Lames 13 mm très courbes

A3-5010

LAFORGE CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS
Extra thin 13 mm long blades, strong curve

A3-5010


CISEAUX A CAPSULE DE GALAND
Coudé

A3-5100

GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS
Angled forward

A3-5100


CISEAUX A CAPSULE DE LESCURE GALAND
Coudé, courbe

A3-5110

LESCURE GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS
Curved blades angled forward

A3-5110


MARQUEUR OPTIQUE DE HOFFER
Avec viseur en croix
HOFFER OPTIC ZONE MARKER
With extra fine cross hairs


∅ 3,00 mm	A4-1300
∅ 3,25 mm	A4-1325
∅ 3,50 mm	A4-1350
∅ 3,75 mm	A4-1375
∅ 4,00 mm	A4-1400
∅ 6,00 mm	A4-1600
∅ 7,00 mm	A4-1700

∅ 3.00 mm	A4-1300
∅ 3.25 mm	A4-1325
∅ 3.50 mm	A4-1350
∅ 3.75 mm	A4-1375
∅ 4.00 mm	A4-1400
∅ 6.00 mm	A4-1600
∅ 7.00 mm	A4-1700


ANNEAU DE FIXATION SCLERALE
GLOBE FIXATION RING
Multiple teeth

A4-3100

A4-3100

CANULES
CANNULAS

CANULE DE CHARLEUX 13 mm
Pour l'extraction du cortex
CHARLEUX CANNULA 13 mm
Cortex extractor cannula

∅ 0,6 mm	A5-1000
∅ 0,5 mm	A5-1010
∅ 0,4 mm	A5-1015

∅ 0.6 mm	A5-1000
∅ 0.5 mm	A5-1010
∅ 0.4 mm	A5-1015


CANULE DE CHARLEUX 20 mm
Pour l'extraction du cortex
CHARLEUX CANNULA 20 mm
Cortex extractor cannula

0,6 mm	A5-1020
--------	---------

0.6 mm	A5-1020
--------	---------


CANULE DE SIMCOE
Trou d'aspiration 0,3 mm
SIMCOE CANNULA
Cortex extractor cannula
0.3 mm aspiration port

A5-1050

A5-1050


CANULE DE BINKHORST
Droite, 0,6 mm
BINKHORST CANNULA
Straight, front opening, 0.6 mm dia.

A5-1100

A5-1100


CANULE DE BINKHORST
A gauche
BINKHORST CANNULA
Left, front opening

A5-1110

A5-1110


CANULE DE BINKHORST
A droite
BINKHORST CANNULA
Right, front opening

A5-1120

A5-1120


CANULE THX DOUBLE COURANT

Coaxiale, courbe, dia. 1,1 mm

Trou d'aspiration :

\varnothing 0,3 mm A5-1213

\varnothing 0,2 mm A5-1222

\varnothing 0,4 mm A5-1234

THX I/A CANNULA

Coaxial, curved, 1.1 mm dia.

Aspiration port:

\varnothing 0.3 mm A5-1213

\varnothing 0.2 mm A5-1222

\varnothing 0.4 mm A5-1234


CANULE THX-TEYSSIER

Pour le lavage du cortex après la phacosection

Trou d'aspiration :

\varnothing 0,6 mm A5-1235

THX TEYSSIER I/A CANNULA

To remove the cortex during small incision surgery (phacosection)

Bevelled aspirating port:

\varnothing 0.6 mm A5-1235


CANULE THX MODIFIEE TURUT

Charleux double courant

Trou d'aspiration biseauté

A5-1240

THX TURUT I/A CANNULA

(Charleux I/A cannula)

Bevelled aspirating port

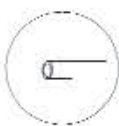
A5-1240


RACCORD MALE-MALE

A5-1340

MALE-MALE CONNECTOR

A5-1340


CANULE D'IRRIGATION

\varnothing 1,0 mm A5-1341

\varnothing 0,6 mm A5-1342

IRRIGATING CANNULA

\varnothing 1.0 mm A5-1341

\varnothing 0.6 mm A5-1342


CANULE DE GUERIN

Pour nettoyage de la face postérieure de la capsule antérieure

A5-1343

GUERIN CANNULA

To polish the back side of the anterior capsule

A5-1343


CANULE DE GUERIN

Pour nettoyage de la face postérieure de la capsule antérieure à midi

A5-1344

GUERIN CANNULA

To polish the back side of the anterior capsule at twelve o'clock

A5-1344



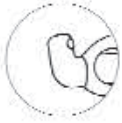
CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE INVERSEE
Aspiration côté canon central dia. 0,3
 A5-1300

REVERSED SIMCOE I/A CANNULA
Aspirating port 0.3 mm dia.
 A5-1300



CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE ORIGINALE
Aspiration côté tuyau silicone
Trou d'aspiration 0,3 mm
 A5-1350

ORIGINAL SIMCOE I/A CANNULA
Aspirating port 0.3 mm dia.
 A5-1350



CANULE THX DOUBLE COURANT «CLUB DE GOLF»
Pour les masses de midi
Trou d'aspiration latéral 0,3 mm
 A5-1400

THX «CLUB DE GOLF» I/A CANNULA
For twelve o'clock cortex extraction
Aspirating port 0.3 mm dia.
 A5-1400



CANULE THX DOUBLE COURANT «CLUB DE GOLF»
Trou d'aspiration distal
 A5-1410

THX «CLUB DE GOLF» I/A CANNULA
Front opening
 A5-1410



TUBE SILICONE (1 mètre)
Pour canules THX
 A5-1450

SILICONE TUBING (1 meter)
For THX cannulas
 A5-1450



CANULE DE CHAZALON
Pour aspirer les masses de midi en passant par la contre incision
 A5-1460

CHAZALON CANNULA
To remove the twelve o'clock cortex going through the side incision
 A5-1460

CANULE DE CHAZALON POUR GAUCHER
 A5-1465

CHAZALON CANNULA FOR LEFT HANDED SURGEON
 A5-1465



CANULE THX MODIFIEE LAFORGE
Trou d'aspiration biseauté
Dia. ext. 1,5 mm
 A5-1500

LAFORGE THX CANNULA
Outer dia. 1.5 mm
Bevelled aspirating port
 A5-1500



CANULE POUR HYDRODISSECTION
 A5-1600

HYDRO-DISSECTION CANNULA
 A5-1600



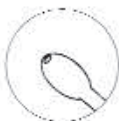
CANULE POUR LE HEALON
Coudée à 10 mm, dia. 0,5 mm
 A5-2000

HEALON CANNULA
Angled 10 mm from tip, 0.5 mm dia.
 A5-2000


CANULE DE RYCROFT
Pour injection d'air
 \varnothing 0,3 mm A5-2113

 \varnothing 0,4 mm A5-2114

RYCROFT AIR CANNULA
For air injection
 \varnothing 0.3 mm A5-2113

 \varnothing 0.4 mm A5-2114

CANULE DE BARRAQUER
A bout olivaire
 \varnothing 0,5 mm A5-2200

BARRAQUER CANNULA
Delicate olive tip
 \varnothing 0.5 mm A5-2200

CANULE GRATTEUSE
Courbe

A5-4100

ABRASIVE CANNULA
Curved

A5-4100


**CANULE DE CHARLEUX
GRATTEUSE**

A5-4200

**CHARLEUX ABRASIVE
CANNULA**

A5-4200


CANULE DE KRATZ GRATTEUSE
*Avec face inférieure de l'olive
agressive*

A5-4300

KRATZ ABRASIVE CANNULA
*Olive tip with abrasive inferior side,
front opening*

A5-4300


CANULE THX GRATTEUSE
Trou d'aspiration 0,3 mm

A5-4600

THX ABRASIVE CANNULA
Aspirating port facing into curve

A5-4600


CANULE DE GALEZOWSKI
Pour voies lacrymales
Courte, droite, 14 mm

A5-5000

GALEZOWSKI CANNULA
Lacrimal cannula
Small, straight, 14 mm

A5-5000


CANULE DE GALEZOWSKI
Courbe

A5-5100

GALEZOWSKI CANNULA
Curved

A5-5100


CANULE DE GALEZOWSKI
Longue, 18 mm

A5-5200

GALEZOWSKI CANNULA
Long, 18 mm

A5-5200



CANULE DE GASTAUD Moyenne
Pour échange sérum-air et pour viscochirurgie du segment postérieur

A5-6000

MEDIUM GASTAUD CANNULA
For replacing serum with air. For viscosurgery during vitreo retinal surgery

A5-6000



CANULE DE GASTAUD II
Pour injecter la décaline

A5-6010

GASTAUD II CANNULA
To inject liquid perfluoro carbon

A5-6010



CANULE DE GASTAUD III Longue
Pour drainer le liquide sous-rétinien chez les myopes

A5-6020

LONG GASTAUD III CANNULA
For aspiration of sub-retinal liquid in myopic eyes

A5-6020



MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER

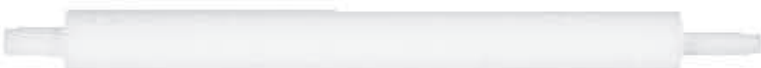
Prise femelle (téflon)

A5-8000

KELLER CANNULA HANDLE

(Teflon) Conus end female

A5-8000



MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER

Prise mâle (téflon)

A5-8010

KELLER CANNULA HANDLE

(Teflon) Conus end male

A5-8010



MANCHETTE DE KELLER

Prise mâle

A5-8020

SHORT KELLER CANNULA HANDLE

Conus end male

A5-8020



MANCHETTE DE KELLER

Prise femelle

A5-8030

SHORT KELLER CANNULA HANDLE

Conus end female

A5-8030

MANCHE PORTE-CANULE
Pour canules interchangeables


A5-9200

UNIVERSAL I/A HANDPIECE
For interchangeable tips

A5-9200

CANULE DROITE
Pour manche A5-9200
Trou d'aspiration 0,3 mm


A5-9301

STRAIGHT TIP
For A5-9200 handpiece
Aspirating port 0.3 mm

A5-9301

CANULE COUDEE A 45°
Pour manche A5-9200
Trou d'aspiration 0,3 mm


A5-9303

45° ANGLED TIP
For A5-9200 handpiece
Aspirating port 0.3 mm

A5-9303

CANULE COUDEE A 90°
Pour manche A5-9200
Trou d'aspiration 0,3 mm


A5-9304

90° ANGLED TIP
For A5-9200 handpiece
Aspirating port 0.3 mm

A5-9304

CANULE CROSSE D'EVEQUE
Pour manche A5-9200
Trou d'aspiration en bout


A5-9306

BINKHORST TIP
For A5-9200 handpiece
Front opening

A5-9306

MANCHE I/A FCI
Pour canules amovibles


A5-9400

FCI I/A HANDPIECE
For interchangeable tips

A5-9400

CANULE AMOVIBLE DROITE
Pour manche I/A A5-9400
Trou d'aspiration 0,3 mm


A5-9401

STRAIGHT INTERCHANGEABLE TIP
For A5-9400 I/A handpiece
Aspirating port 0.3 mm

A5-9401

CANULE AMOVIBLE COURBE
Pour manche I/A A5-9400
Trou d'aspiration 0,3 mm


A5-9402

CURVED INTERCHANGEABLE TIP
For A5-9400 I/A handpiece
Aspirating port 0.3 mm

A5-9402

CANULE AMOVIBLE COUDEE
Pour manche I/A A5-9400
Trou d'aspiration 0,3 mm

Coudée à 45° A5-9403
Coudée à 90° A5-9404

ANGLED INTERCHANGEABLE TIP
For A5-9400 I/A handpiece
Aspirating port 0.3 mm

45° angled A5-9403
90° angled A5-9404

CANULE AMOVIBLE DE BINKHORST
Pour manche I/A A5-9400
Trou d'aspiration en bout


A5-9406

BINKHORST INTERCHANGEABLE TIP
For A5-9400 I/A handpiece
Front opening

A5-9406


**PINCE DE KELMAN MAC
PHERSON**
11 mm, avec plateaux

A6-1300

**KELMAN McPHERSON
FORCEPS**
*Angled, very delicate 11 mm long
smooth jaws*

A6-1300


PINCE D'UTRATA
Pour le capsulorhexis (bouts mousses)

A6-1500

UTRATA FORCEPS
*For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips*

A6-1500


PINCE D'UTRATA COURBE
Pour le capsulorhexis (bouts mousses)

A6-1510

CURVED UTRATA FORCEPS
*For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips and extremely thin 11
mm long vaulted shanks*

A6-1510


PINCE DE CORYDON
*Courbe, bouts pointus, corps rond,
titane*

A6-1520

CORYDON FORCEPS
*Extremely thin 11 mm long shanks
cystotome shaped tips (Titanium)*

A6-1520


PINCE DE CORYDON
*Courbe, bouts pointus, corps plat,
titane*

A6-1530

CORYDON FORCEPS
*Extremely thin 11 mm long shanks
cystotome shaped tips (Titanium)
Flat handle*

A6-1530


PINCE D'UTRATA
Bouts mousses, corps plat, titane

A6-1540

UTRATA FORCEPS
*For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips and extremely thin
11 mm long vaulted shanks (Titanium)
Flat handle*

A6-1540


PINCE D'UTRATA
Bouts mousses, corps rond, titane

A6-1550

UTRATA FORCEPS
*For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips and extremely thin
11 mm long vaulted shanks (Titanium)*

A6-1550


PINCE A CHALAZION DE DESMARRES

20 mm A6-2020

DESMARRES CHALAZION FORCEPS

20 mm A6-2020


PINCE A CHALAZION DE DESMARRES

26 mm A6-2026

DESMARRES CHALAZION FORCEPS

26 mm A6-2026


PINCE A CILS DE BARRAQUER

A6-3000

BARRAQUER CILIA FORCEPS

A6-3000


PINCE A DISSEQUER
Droite, mors striés

A6-3100

DRESSING FORCEPS
Serrated, straight

A6-3100


PINCE A DISSEQUER
Droite, 1 x 2 dents (0,7 mm)

A6-3120

TISSUE FORCEPS
Straight, 1 x 2 teeth (0.7 mm)

A6-3120


PINCE D'ADSON BROWN
Mors striés

A6-3150

ADSON BROWN FORCEPS
Serrated jaws, straight

A6-3150


PINCE D'ADSON
1 x 2 dents

A6-3160

ADSON TISSUE FORCEPS
1 x 2 teeth

A6-3160


PINCE DE HALSTED
10 cm, mors striés

A6-4000

HALSTED MOSQUITO FORCEPS
10 cm, serrated jaws

A6-4000


PINCE DE HALSTED
10 cm, 1 x 2 dents

A6-4010

HALSTED MOSQUITO FORCEPS
10 cm, 1 x 2 teeth

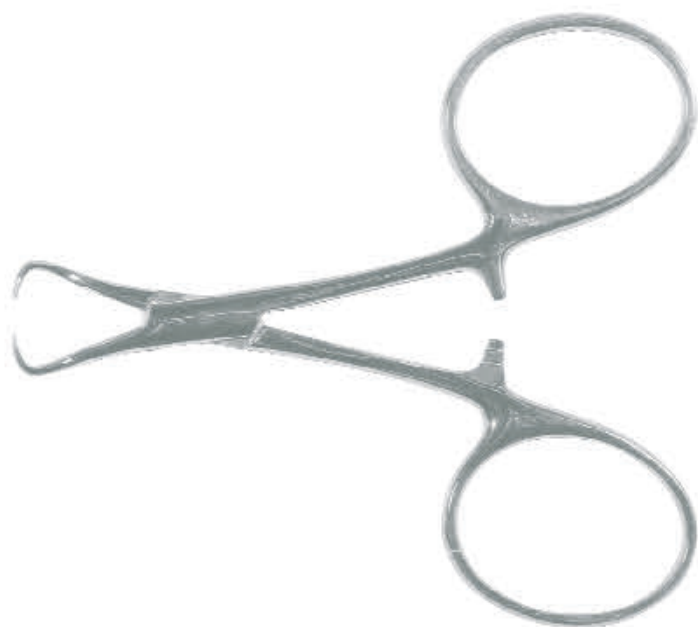
A6-4010


PINCE PUCE
5 cm, droite, pour tendre les fils

A6-4100

SERREFINE
5 cm, straight

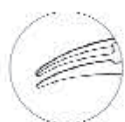
A6-4100


PINCE A CHAMPS
8 cm

A6-4200

TOWEL CLAMP
8 cm

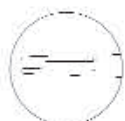
A6-4200


PINCE DE HARMS TUBINGEN
Pour sutures 7-0 à 9-0
Courbe

A6-5060

HARMS TUBINGEN FORCEPS
Tying forceps for 7-0 to 9-0 sutures
Curved

A6-5060


PINCE A MONOFILAMENT
TROUTMAN
Pour sutures 9-0 à 11-0, droite

A6-5100

TROUTMAN TYING FORCEPS
Very delicate smooth jaws with long platform for 9-0 to 11-0 sutures
Straight

A6-5100


PINCE A MONOFILAMENT TROUTMAN

*Pour sutures 9-0 à 11-0
Courbe*

A6-5110

TROUTMAN TYING FORCEPS

*Very delicate smooth jaws with long platform for 9-0 to 11-0 sutures
Curved*

A6-5110


PINCE A MONOFILAMENT
Courbe, titane, corps rond

A6-5120

MONOFILAMENT TYING FORCEPS

*Very delicate smooth jaws with long platform for 9-0 to 11-0 sutures
Curved, titanium*

A6-5120


PINCE A MONOFILAMENT
Courbe, titane, corps plat

A6-5130

MONOFILAMENT TYING FORCEPS

*Very delicate smooth jaws with long platform for 9-0 to 11-0 sutures
Curved, flat handle, titanium*

A6-5130


PINCE COLIBRI

Pour enlever les fils

A6-5150

COLIBRI FORCEPS

For suture removal, pointed tips

A6-5150


PINCE D'ELSCHNIG A DROIT SUPERIEUR

1 x 2 dents, droite

A6-6000

ELSCHNIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS

1 x 2 teeth, straight

A6-6000


PINCE D'ELSCHNIG A DROIT SUPERIEUR

Courbe

A6-6010

ELSCHNIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS

Curved

A6-6010


PINCE A FIXER DE GREEN

10 mm

A6-6210

GREEN FIXATION FORCEPS

10 mm

A6-6210


PINCE DE BONN

*1 x 2 dents, 0,12 mm
Avec micro plateaux, 7 cm*

A6-7100

BONN FORCEPS

*1 x 2 teeth, 0.12 mm
With tying platforms, 7 cm*

A6-7100


PINCE DE BONN

10 cm

A6-7110

BONN FORCEPS

10 cm

A6-7110


PINCE DE BONN
1 x 2 dents, 0,12 mm
Avec micro plateaux, titane, corps rond

A6-7130
BONN FORCEPS
1 x 2 teeth, 0.12 mm
With tying platform, titanium
A6-7130

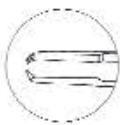
PINCE DE BONN
1 x 2 dents, 0,12 mm
Avec micro plateaux, titane, corps plat

A6-7140
BONN FORCEPS
1 x 2 teeth, 0.12 mm
With tying platform, flat handle, titanium
A6-7140

PINCE DE BARRAQUER COLIBRI
Micro plateaux, 1 x 2 dents 0,12 mm
Angulées à 90°
A6-7200
BARRAQUER COLIBRI FORCEPS
With tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
Angled at 90°
A6-7200

PINCE DE BARRAQUER COLIBRI
Micro plateaux, 1 x 2 dents 0,12 mm
Angulées à 120°
A6-7210
BARRAQUER COLIBRI FORCEPS
With tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
Angled at 120°
A6-7210

PINCE DE BARRAQUER COLIBRI
Micro-plateaux, 1 x 2 dents 0,12 mm
angulées à 90°, titane
A6-7220

BARRAQUER COLIBRI FORCEPS
With tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm,
angled at 90°, titanium
A6-7220

PINCE DE PAUFIQUE
Dents 0,5 mm
A6-8000
PAUFIQUE FORCEPS
0.5 mm teeth
A6-8000

PINCE A SUTURES DE CASTROVIEJO
1 x 2 dents
0,12 mm **A6-8012**
0,30 mm **A6-8030**
0,50 mm **A6-8050**
CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS
1 x 2 teeth
0.12 mm **A6-8012**
0.30 mm **A6-8030**
0.50 mm **A6-8050**

PINCE DE CORNIC
Pour l'implant, le monofilament et la capsule
A6-9000
CORNIC FORCEPS
Monofilament forceps for lens implant and capsule
A6-9000


PINCE DE ARON-ROSA II
Pour poser la LIO

A6-9130

ARON-ROSA II FORCEPS
Modified posterior chamber IOL forceps

A6-9130


PINCE A SAISIR LES IMPLANTS SOUPLES

A6-9160

GRASPING FOLDABLE LENS FORCEPS

A6-9160


PINCE DE MAC DONALD FINE

A6-9165

McDONALD FOLDABLE FORCEPS
With very fine jaws

A6-9165


PINCE DE MAC DONALD II

A6-9170

McDONALD II FOLDABLE FORCEPS

A6-9170


PINCE DE SALZ
Pour casser le noyau pendant la phacoémulsification, titane

A6-9175

SALZ NUCLEUS SPLITTER
*Nucleus splitter
Titanium*

A6-9175


PINCE «PICK-UP AND FOLD»
Pour saisir et plier l'implant souple, titane

A6-9180

PICK-UP AND FOLD FORCEPS
To pick-up and fold the foldable lens, titanium

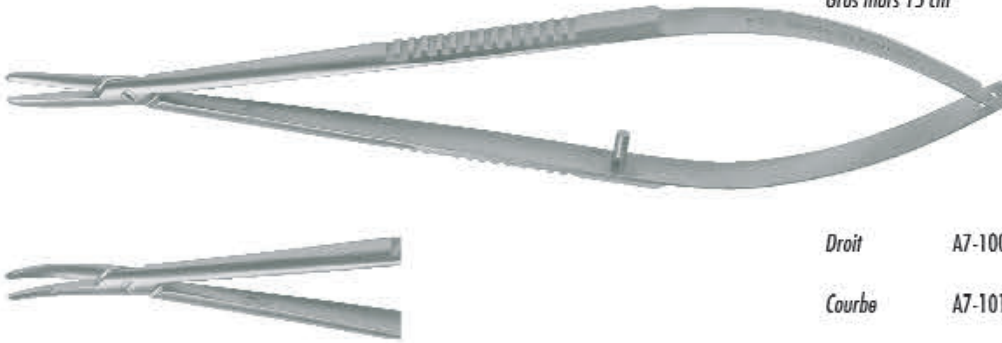
A6-9180


PINCE DE FINE
Pour prendre l'implant souple plié dans la pince «Pick-up and fold» et le poser à travers la petite incision, titane

A6-9185

FINE FORCEPS
To grasp the folded optic and insert through the small incision, Titanium

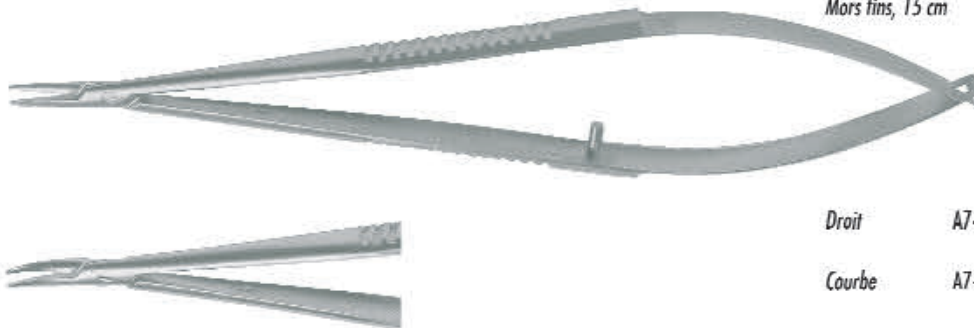
A6-9185

PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO
Gros mors 15 cm
CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER
Standard jaws, 15 cm

Droit A7-1000

Straight A7-1000

Courbe A7-1010

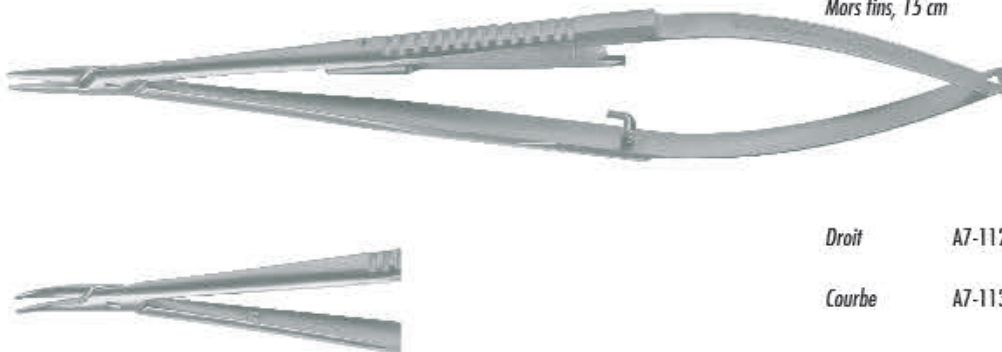
Curved A7-1010

PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO
Mors fins, 15 cm
CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER
Delicate jaws, 15 cm

Droit A7-1100

Straight A7-1100

Courbe A7-1110

Curved A7-1110

PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO A ARRET
Mors fins, 15 cm
CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER WITH LOCK
Delicate jaws, 15 cm

Droit A7-1120

Straight A7-1120

Courbe A7-1130

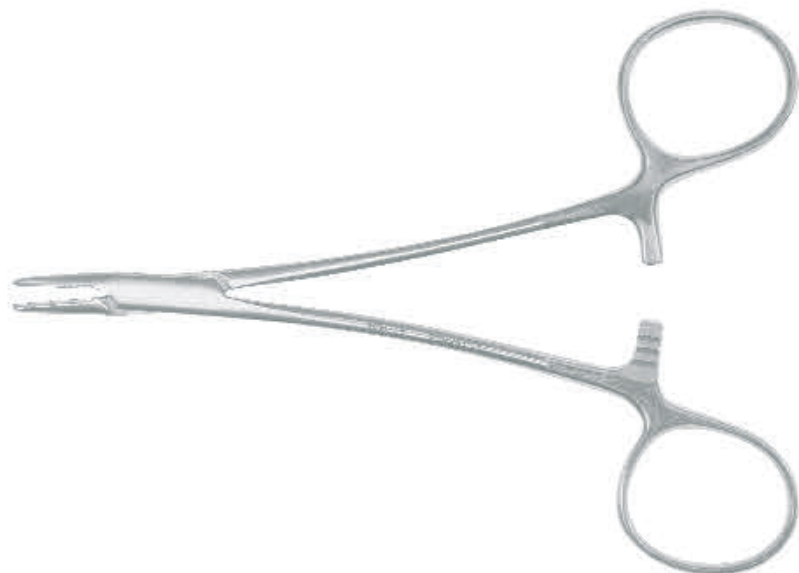
Curved A7-1130

PORTE-AIGUILLE GROS MANCHE
NEEDLE HOLDER LARGE HANDLE

A7-1200

A7-1200




PORTE-AIGUILLE DE HALSEY
Mors tungstène

A7-1400

HALSEY NEEDLE HOLDER
Tungstene jaws

A7-1400


MICRO PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO
12 cm, courbe

A7-2010

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER
12 cm long, very delicate jaws, curved

A7-2010


MICRO PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER TROUTMAN
*10 cm, mors très fins
Courbe*

A7-3010

**BARRAQUER TROUTMAN
NEEDLE HOLDER**
*Short model, extra delicate jaws
Curved*

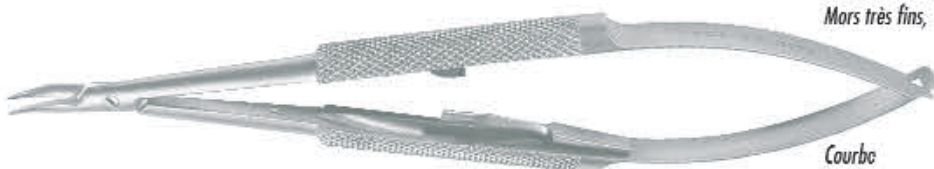
A7-3010


PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER
13 cm, mors très fins
BARRAQUER NEEDLE HOLDER
13 cm, extra delicate jaws

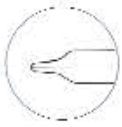
Droit A7-3100

Straight A7-3100

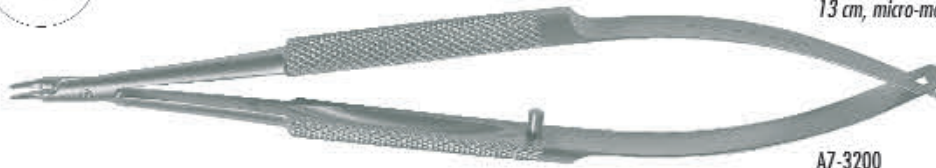
Courbe A7-3110

Curved A7-3110

PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER A ARRET
Mors très fins, 13 cm
Courbe A7-3130

**BARRAQUER NEEDLE HOLDER
WITH LOCK**
Extra delicate jaws, 13 cm
Courbe A7-3130


MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC

13 cm, micro-mors becs dégagés



A7-3200

CORNIC NEEDLE HOLDER

Curved, 13 cm, extremely delicate jaws at the tip

A7-3200


MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC

13 cm, micro-mors becs dégagés, titane



A7-3210

CORNIC NEEDLE HOLDER

*Curved, 13 cm, extremely delicate jaws at the tip
Titanium*

A7-3210

BOITES DE STERILISATION

STERILIZING TRAYS



BOITES PLASTIQUE *Pour autoclave*

160 x 70 x 20 mm

A8-3000

STERILIZING TRAY

Autoclavable plastic with silicone mat

160 x 70 x 20 mm

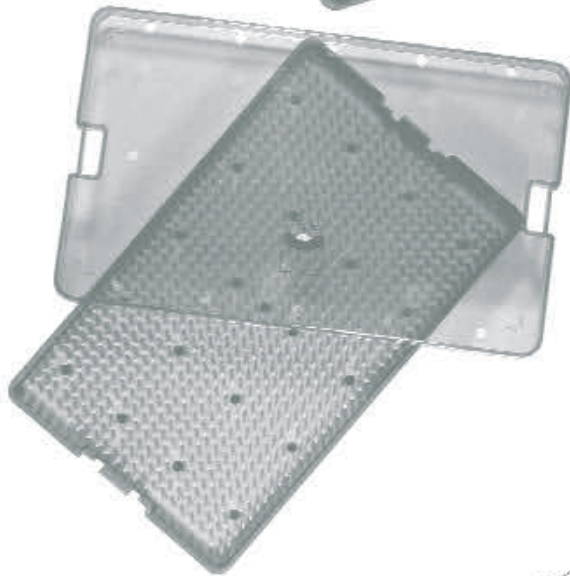
A8-3000

170 x 108 x 20 mm

A8-3003

170 x 108 x 20 mm

A8-3003



260 x 160 x 20 mm

A8-3005

260 x 160 x 20 mm

A8-3005

BOITES PLASTIQUE

Pour autoclave, deux niveaux

260 x 160 x 40 mm

A8-3010

STERILIZING TRAY

Autoclavable plastic with silicone mats
Two levels

260 x 160 x 40 mm

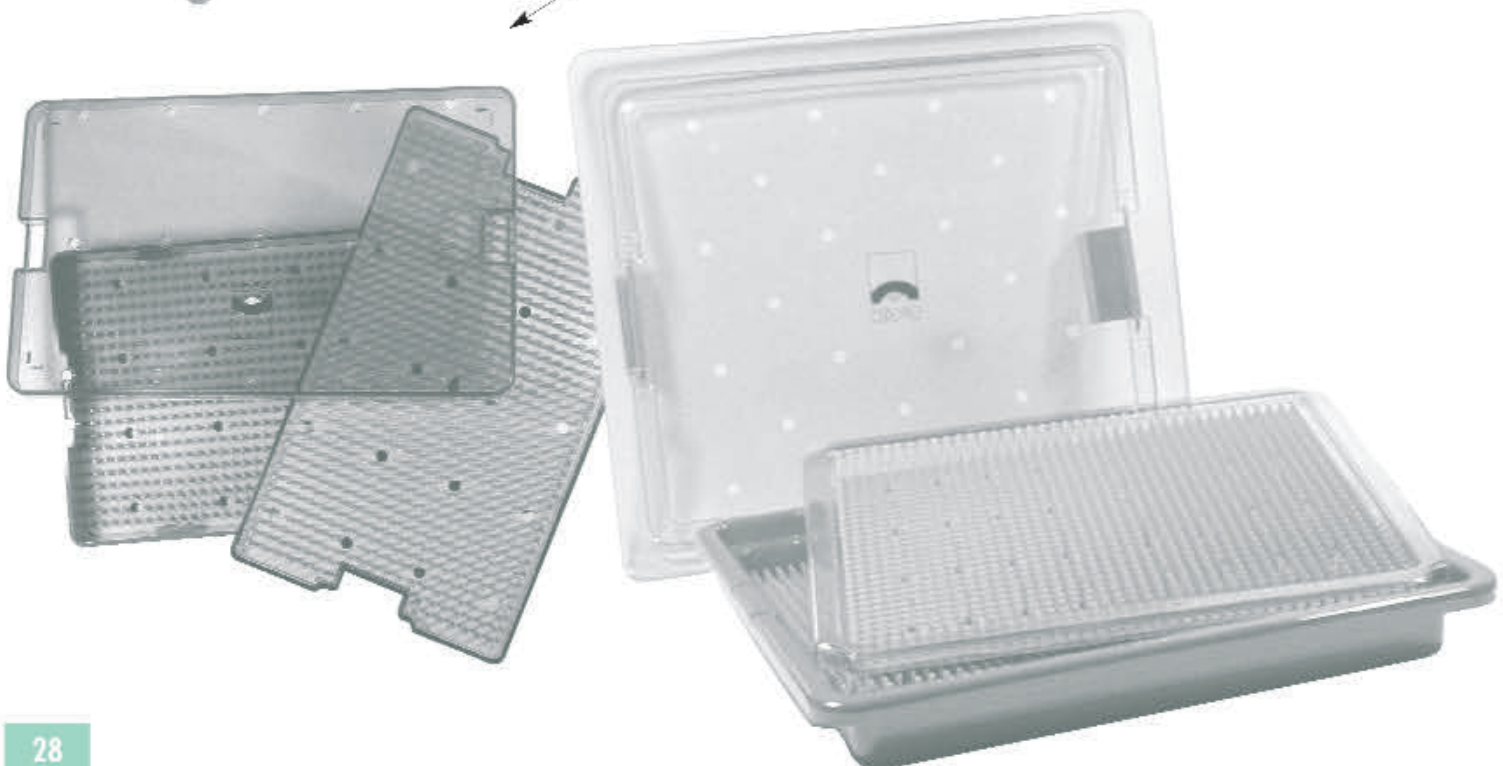
A8-3010

280 x 240 x 40 mm

A8-3020

280 x 240 x 40 mm

A8-3020



VOIES LACRYMALES

LACRIMAL INSTRUMENTS

STYLET DILATATEUR DE SICHEL WILDER

SICHEL WILDER LACRIMAL DILATOR



<i>Fin</i>	A8-4000	<i>Fine taper</i>	A8-4000
<i>Moyen</i>	A8-4010	<i>Medium taper</i>	A8-4010
<i>Fort</i>	A8-4020	<i>Heavy taper</i>	A8-4020

STYLET DILATATEUR DOUBLE

DOUBLE-END LACRIMAL DILATOR



A8-4050	A8-4050
---------	---------

SONDE DE GALEZOWSKI

GALEZOWSKI LACRIMAL PROBE



<i>000</i>	A8-4110	<i>000</i>	A8-4110
------------	---------	------------	---------



<i>00</i>	A8-4120	<i>00</i>	A8-4120
-----------	---------	-----------	---------



<i>0</i>	A8-4130	<i>0</i>	A8-4130
----------	---------	----------	---------



<i>1</i>	A8-4140	<i>1</i>	A8-4140
----------	---------	----------	---------



<i>2</i>	A8-4150	<i>2</i>	A8-4150
----------	---------	----------	---------



<i>3</i>	A8-4160	<i>3</i>	A8-4160
----------	---------	----------	---------



<i>4</i>	A8-4170	<i>4</i>	A8-4170
----------	---------	----------	---------



<i>5</i>	A8-4180	<i>5</i>	A8-4180
----------	---------	----------	---------



RONGEUR DE KERRISON

**KERRISON BONE NIBBLING
RONGEUR**

A9-1000

A9-1000



ECARTEUR DE KNAPP
4 griffes mousses

KNAPP LACRIMAL RETRACTOR
4-prong, blunt

A9-2100

A9-2100


**COUTEAU DIAMANT 3 CRANS
«CLEAR CORNEA» DROIT**

Pointe à 60°
Largeur : 3,1 mm
Longueur : 5,5 mm, 0,6 mm et 0,3 mm
Épaisseur : 0,17 mm

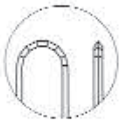


4-1317

**3 STEPS DIAMOND KNIFE
«CLEAR CORNEA» STRAIGHT**

60° tip
Wide: 3,1 mm
Length: 5.5 mm, 0.6 mm et 0.3 mm
Thickness: 0.17 mm

4-1317


**COUTEAU DIAMANT
«SCLERAL POCKET» ANGULÉ**

9 facettes
Largeur : 2,0 mm
Longueur : 4,0 mm
Épaisseur : 0,17 mm



4-1389

**DIAMOND KNIFE «SCLERAL
POCKET» ANGLED**

Crescent shaped blade designed for scleral pocket incision
Wide: 2.0 mm
Length: 4.0 mm
Thickness: 0.17 mm

4-1389


**COUTEAU DIAMANT
«CLEAR CORNEA» COUDÉ**

Pointe à 60°
Largeur : 3,0 mm
Longueur : 5,5 mm
Épaisseur : 0,17 mm



4-1525

**DIAMOND KNIFE «CLEAR
CORNEA» ANGLED**

60° tip
Wide: 3.0 mm
Length: 5.5 mm
Thickness: 0.17 mm

4-1525


COUTEAU POUR KR

Double tranchant



4-1334

**RK DIAMOND MICROMETER
KNIFE**

Double cutting edge (vertical and 45°)

4-1334


PLAQUE DE HUCO KREMER

Pour vérifier la profondeur de lame

4-6895

HUCO KREMER BLADE GAUGE

To verify micrometer blade depth

4-6895

A

ADSON, PINCE D'ADSON	20
ADSON-BROWN, PINCE D'ADSON-BROWN	20
AIGUILLE A CORPS ETRANGERS	3
ANNEAU DE FIXATION SCLERALE	13
ANSE DE SWELLEN	7
ANSE IRRIGATRICE DE PEARCE	7
ARNEODO, MANIPULATEUR D'ARNEODO	7
ARON-ROSA, PINCE D'ARON-ROSA II	24
ARRUGA, CROCHET D'ARRUGA	6
ASTI DISC	8

B

BARRAQUER, CANULE DE BARRAQUER	16
BARRAQUER, CISEAUX A IRIDECTOMIE DE BARRAQUER	11
BARRAQUER, PINCE A CILS DE BARRAQUER	20
BARRAQUER, PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER	26
BARRAQUER, SPATULE DE BARRAQUER	5
BARRAQUER-COLIBRI, BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER-COLIBRI	1
BARRAQUER-COLIBRI, PINCE DE BARRAQUER-COLIBRI	23
BARRAQUER-TROUTMAN, MICRO PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER	26
BERNARD, CURETTE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD	4
BINKHORST, CANULE AMOVIBLE DE BINKHORST	18
BINKHORST, CANULE DE BINKHORST	13
BISECTEUR DE TEYSSIER	5
BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER-COLIBRI	1
BLEPHAROSTAT DE CASTROVIEJO	2
BLEPHAROSTAT DE CORCELLE	1
BLEPHAROSTAT DE PLEY	1
BLEPHAROSTAT POUR PHACO	1
BOITES DE STERILISATION	28
BONN, CISEAUX DE BONN	9
BONN, ECARTEUR DE BONN	2
BONN, MICRO-CROCHET A IRIS DE BONN	6
BONN, PINCE DE BONN	22,23

C

CANULE AMOVIBLE COUDEE A 45°	18
CANULE AMOVIBLE COUDEE A 90°	18
CANULE AMOVIBLE COURBE	18
CANULE AMOVIBLE DE BINKHORST	18
CANULE AMOVIBLE DROITE	18
CANULE COUDEE A 45° POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE COUDEE A 90° POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE CROSSE D'EYEQUE POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE DE BARRAQUER	16
CANULE DE BINKHORST	13
CANULE DE CHARLEUX	13,16
CANULE DE CHARLEUX GRATTEUSE	16
CANULE DE CHAZALON	15
CANULE DE GALEZOWSKI	16
CANULE DE GASTAUD MOYENNE	17
CANULE DE GASTAUD II	17
CANULE DE GASTAUD III LONGUE	17
CANULE DE GUERIN	14
CANULE DE KRATZ GRATTEUSE	16
CANULE DE RYCROFT	16
CANULE DE SIMCOE	13
CANULE D'IRRIGATION	14
CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE INVERSEE	15
CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE ORIGINALE	15
CANULE DROITE POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE GRATTEUSE	16
CANULE POUR HYDRODISSECTION	15
CANULE POUR LE HEALON	15
CANULE THX	14
CANULE THX CLUB DE GOLF	15
CANULE THX GRATTEUSE	16
CANULE THX-LAFORGE	15
CANULE THX-TEYSSIER	14
CANULE THX-TURUT	14
CASTROVIEJO, BLEPHAROSTAT DE CASTROVIEJO	2
CASTROVIEJO, CISEAUX DE CASTROVIEJO	11
CASTROVIEJO, COMPAS DE CASTROVIEJO	8
CASTROVIEJO, MICRO PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	26
CASTROVIEJO, PINCE A SUTURES DE CASTROVIEJO	23
CASTROVIEJO, PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	25
CHARLEUX, CANULE DE CHARLEUX	13,16
CHARLEUX, CANULE GRATTEUSE DE CHARLEUX	16
CHAZALON, CANULE DE CHAZALON	15
CHOPPER	7
CISEAUX A CAPSULE DE CORNIC	12
CISEAUX A CAPSULE DE GALAND	12
CISEAUX A CAPSULE DE LAFORGE-CORNIC	12
CISEAUX A CAPSULE DE LESQUIRE-GALAND	12
CISEAUX A ENUCLEATION	10
CISEAUX A IRIDECTOMIE DE BARRAQUER	11

CISEAUX A IRIDECTOMIE DE WECKER	10
CISEAUX DE BONN	9
CISEAUX DE CASTROVIEJO	11
CISEAUX DE KATZIN	11
CISEAUX DE SEVRIN-STEVENS	10
CISEAUX DE VANNAS	12
CISEAUX DE WESTCOTT	11
CISEAUX D'OPHTHALMOLOGIE	9
CISEAUX, MICRO CISEAUX DE VANNAS	12
CLEAR CORNEA, COUTEAU DIAMANT CLEAR CORNEA	31
COLIBRI, PINCE COLIBRI	22
COMPAS DE CASTROVIEJO	8
COQUE EN PASTIQUE	8
CORCELLE, BLEPHAROSTAT DE CORCELLE	1
CORNIC, CISEAUX A CAPSULE DE CORNIC	12
CORNIC, MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC	27
CORNIC, PINCE DE CORNIC	23
CORNIC, SPATULE DE CORNIC	5
CORYDON, PINCE DE CORYDON	19
COUTEAU CLIVEUR DE PAUFIGUE	3
COUTEAU DIAMANT DE HUCO	31
COUTEAU POUR KR	31
CROCHET A DR	5
CROCHET A STRABISME DE GRAEFE	5
CROCHET BOUTON DE COL	6
CROCHET D'ARRUGA	6
CROCHET DE GASS ROUCHY	5
CROCHET DE GILLIES	6
CROCHET DE JAFFE BECHERT	7
CROCHET DE LESTER	7
CROCHET DE SINSKEY	6
CROCHET DE SINSKEY-CORNIC	6
CROCHET, MICRO CROCHET A IRIS DE BONN	6
CULLER, SPATULE A IRIS DE CULLER	5
CURETTE A CHALAZION DE MEYERHOEFER	4
CURETTE A EVISCERATION	4
CURETTE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD	4

D

DESMARRES, PINCE A CHALAZION DE DESMARRES	20
DESMARRES, RELEVEUR A PAUPIERES DE DESMARRES	2

E

ECARTEUR DE BONN	2
ECARTEUR DE KNAPP	30
ELSCHNIG, PINCE D'ELSCHNIG A DROIT SUPERIEUR	22

F

FINE, PINCE DE FINE	24
---------------------	----

G

GALAND, CISEAUX A CAPSULE DE GALAND	12
GALEZOWSKI, CANULE DE GALEZOWSKI	16
GALEZOWSKI, SONDE DE GALEZOWSKI	29
GASS-ROUCHY, CROCHET DE GASS-ROUCHY	5
GASTAUD, CANULE DE GASTAUD II	17
GASTAUD, CANULE DE GASTAUD III LONGUE	17
GASTAUD, CANULE DE GASTAUD MOYENNE	17
GILLIES, CROCHET DE GILLIES	6
GRAEFE, CROCHET A STRABISME DE GRAEFE	5
GREEN, PINCE A FIXER DE GREEN	22
GUERIN, CANULE DE GUERIN	14

H

HALSEY, PORTE-AIGUILLE DE HALSEY	26
HALSTED, PINCE DE HALSTED	21
HARMS-TUBINGEN, PINCE DE HARMS-TUBINGEN	21
HEALON, CANULE POUR LE HEALON	15
HOFFER, MARQUEUR OPTIQUE DE HOFFER	13
HUCO, COUTEAU DIAMANT 3 CRANS	31
HUCO, COUTEAU POUR KR	31
HUCO-KREMER, PLAQUE DE HUCO-KREMER	31
HYDRODISSECTION, CANULE POUR HYDRODISSECTION	15

J

JAEGER, PLAQUE A PAUPIERES DE JAEGER	2
JAFFE-BECHERT, CROCHET DE JAFFE BECHERT	7

K

KATZIN, CISEAUX DE KATZIN	11
KELLER, MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER	17
KELLER, MANCHETTE DE KELLER	17
KELMAN MAC PHERSON, PINCE DE KELMAN MAC PHERSON	19
KERRISON, RONGEUR DE KERRISON	30
KNAPP, ECARTEUR DE KNAPP	30
KRATZ, CANULE GRATTEUSE DE KRATZ	16

L

LAFORGE, CANULE THX-LAFORGE	15
LAFORGE-CORNIC, CISEAUX A CAPSULE DE LAFORGE-CORNIC	12
LAME BISTOURI N° 11	3
LAMES DE RASOIR	3
LEBUISSON, MANIPULATEUR DE LEBUISSON	7
LESCURE-GALAND, CISEAUX A CAPSULE DE LESCURE-GALAND	12
LESTER, CROCHET DE LESTER	7

M

MAC DONALD, PINCE DE MAC DONALD FINE	24
MAC DONALD, PINCE DE MAC DONALD II	24
MANCHE BISTOURI N° 3	3
MANCHE I/A FCI	18
MANCHE I/A POUR CANULES AMOVIBLES	18
MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER	17
MANCHE PORTE-CANULE POUR CANULES INTERCHANGEABLES	18
MANCHETTE DE KELLER	17
MANIPULATEUR D'ARNEODO	7
MANIPULATEUR DE LEBUISSON	7
MARQUEUR OPTIQUE DE HOFFER	13
MARQUEUR POUR LE DR	8
MEYERHOEFER, CURETTE A CHALAZION DE MEYERHOEFER	4
MICRO PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER-TROUTMAN	26
MICRO PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	26
MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC	27
MONOFILAMENT, PINCE A MONOFILAMENT TROUTMAN	21,22

P

PAUFIQUE, COUPEAU CLIVEUR DE PAUFIQUE	3
PAUFIQUE, PINCE DE PAUFIQUE	23
PEARCE, ANSE IRRIGATRICE DE PEARCE	7
PICK-UP AND FOLD, PINCE "PICK-UP AND FOLD"	24
PINCE "PICK UP AND FOLD"	24
PINCE A CHALAZION DE DESMARRES	20
PINCE A CHAMPS	21
PINCE A CILS BARRAQUER	20
PINCE A DISSEQUEUR	20
PINCE A FIXER DE GREEN	22
PINCE A MONOFILAMENT	22
PINCE A MONOFILAMENT TROUTMAN	21,22
PINCE A SAISIR LES IMPLANTS SOUPLES	24
PINCE A SUTURES DE CASTROVIEJO	23
PINCE COLIBRI	22
PINCE D'ADSON	20
PINCE D'ADSON BROWN	20
PINCE D'ARON ROSA II	24
PINCE DE BARRAQUER-COLIBRI	23
PINCE DE BONN	22,23
PINCE DE CORNIC	23
PINCE DE CORYDON	19
PINCE D'ELSCHNIG A DROIT SUPERIEUR	22
PINCE DE FINE	24
PINCE DE HALSTED	21
PINCE DE HARMS-TUBINGEN	21
PINCE DE KELMAN MAC PHERSON	19
PINCE DE MAC DONALD FINE	24
PINCE DE MAC DONALD II	24
PINCE DE PAUFIQUE	23
PINCE DE SALZ	24
PINCE D'UTRATA	19

PINCE D'UTRATA COURBE	19
PINCE PUCE	21
PLAQUE A PAUPIERES DE JAEGER	2
PLAQUE DE HUCO-KREMER	31
PLEY, BLEPHAROSTAT DE PLEY	1
PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER	26
PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	25
PORTE-AIGUILLE DE HALSEY	26
PORTE-AIGUILLE GROS MANCHE	25
PORTE-LAME DE TROUTMAN	3

R

RACCORD MALE-MALE	14
RELEVEUR A PAUPIERES DE DESMARRES	2
RONGEUR DE KERRISON	30
RYCROFT, CANULE DE RYCROFT	16

S

SALZ, PINCE DE SALZ	24
SCLERAL POCKET, COUPEAU DIAMANT SCLERAL POCKET	31
SERINGUE	8
SEVRIN-STEVEN, CISEAUX DE SEVRIN-STEVEN	10
SICHEL-WILDER, STYLET DILATATEUR DE SICHEL-WILDER	29
SIMCOE, CANULE DE SIMCOE	13
SIMCOE, CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE INVERSEE	15
SIMCOE, CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE ORIGINALE	15
SINSKEY, CROCHET DE SINSKEY	6
SINSKEY-CORNIC, CROCHET DE SINSKEY-CORNIC	6
SNELLEN, ANSE DE SNELLEN	7
SONDE DE GALEZOWSKI	29
SPATULE A IRIS DE CULLER	5
SPATULE DE BARRAQUER	5
SPATULE DE CORNIC	5
STYLET DILATATEUR DE SICHEL-WILDER	29
STYLET DILATATEUR DOUBLE	29

T

TEYSSIER, BISECTEUR DE TEYSSIER	5
TEYSSIER, CANULE THX-TEYSSIER	14
THX, CANULE THX	14
THX, CANULE THX GRATTEUSE	16
THX-CLUB DE GOLF, CANULE THX CLUB DE GOLF	15
THX-LAFORGE, CANULE THX-LAFORGE	15
THX-TEYSSIER, CANULE THX-TEYSSIER	14
THX-TURUT, CANULE THX-TURUT	14
TREPAN MODELE FCI	4
TROUTMAN, PINCE A MONOFILAMENT DE TROUTMAN	21,22
TROUTMAN, PORTE-LAME DE TROUTMAN	3
TUBE SILICONE	15

U

UTRATA, PINCE D'UTRATA	19
UTRATA, PINCE D'UTRATA COURBE	19

V

VANNAS, CISEAUX DE VANNAS	12
VANNAS, MICRO-CISEAUX DE VANNAS	12

W

WECKER, CISEAUX A IRIDECTOMIE DE WECKER	10
WESTCOTT, CISEAUX DE WESTCOTT	11

A

ABRASIVE, ABRASIVE CANNULA	16
ABRASIVE, CHARLEUX ABRASIVE CANNULA	16
ABRASIVE, KRATZ ABRASIVE CANNULA	16
ABRASIVE, THX ABRASIVE CANNULA	16
ADSON, ADSON TISSUE FORCEPS	20
ADSON BROWN, ADSON BROWN FORCEPS	20
ARNEODO, ARNEODO MICRO MANIPULATOR	7
ARON-ROSA, ARON-ROSA II FORCEPS	24
ARRUGA, ARRUGA HOOK	6
ASTI-DISC	8

B

BARRAQUER, BARRAQUER CANNULA	16
BARRAQUER, BARRAQUER CILIA FORCEPS	20
BARRAQUER, BARRAQUER IRIS SCISSORS	11
BARRAQUER, BARRAQUER NEEDLE HOLDER	26
BARRAQUER, BARRAQUER SPATULA	5
BARRAQUER, BARRAQUER WIRE SPECULUM	1
BARRAQUER COLIBRI, BARRAQUER COLIBRI FORCEPS	23
BARRAQUER TROUTMAN, BARRAQUER TROUTMAN NEEDLE HOLDER	26
BERNARD, J.A. BERNARD LACRIMAL CURETTE	4
BINKHORST, BINKHORST CANNULA	13
BISECTOR, TEYSSIER NUCLEUS BISECTOR	5
BLADE BREAKER, TROUTMAN BLADE BREAKER AND HOLDER	3
BONN, BONN FORCEPS	22,23
BONN, BONN MICRO IRIS HOOK	6
BONN, BONN RETRACTOR	2
BONN, BONN SCISSORS	9

C

CALIPER, CASTROVIEJO CALIPER	8
CANNULA, ABRASIVE CANNULA	16
CANNULA, BARRAQUER CANNULA	16
CANNULA, BINKHORST CANNULA	13
CANNULA, CHARLEUX ABRASIVE CANNULA	16
CANNULA, CHARLEUX CANNULA	13
CANNULA, CHAZALON CANNULA	15
CANNULA, GALEZOWSKI CANNULA	16
CANNULA, GASTAUD II CANNULA	17
CANNULA, GUERIN CANNULA	14
CANNULA, HEALON CANNULA	15
CANNULA, HYDRO-DISSECTION CANNULA	15
CANNULA, IRRIGATING CANNULA	14
CANNULA, KRATZ ABRASIVE CANNULA	16
CANNULA, LAFORGE THX CANNULA	15
CANNULA, LONG GASTAUD III CANNULA	17
CANNULA, MEDIUM GASTAUD CANNULA	17
CANNULA, ORIGINAL SIMCOE I/A CANNULA	15
CANNULA, PEARCE IRRIGATING CANNULA	7
CANNULA, REVERSED SIMCOE I/A CANNULA	15
CANNULA, RYCRÖFT AIR CANNULA	16
CANNULA, SIMCOE CANNULA	13
CANNULA, THX ABRASIVE CANNULA	16
CANNULA, THX CLUB DE GOLF I/A CANNULA	15
CANNULA, THX I/A CANNULA	14
CANNULA, THX TEYSSIER I/A CANNULA	14
CANNULA, THX TURUT I/A CANNULA	14
CASTROVIEJO, CASTROVIEJO CALIPER	8
CASTROVIEJO, CASTROVIEJO EYE SPECULUM	2
CASTROVIEJO, CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER	25,26
CASTROVIEJO, CASTROVIEJO SCISSORS	11
CASTROVIEJO, CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS	23
CHALAZION FORCEPS, DESMARRS CHALAZION FORCEPS	20
CHARLEUX, CHARLEUX ABRASIVE CANNULA	16
CHARLEUX, CHARLEUX CANNULA	13
CHAZALON, CHAZALON CANNULA	15
CHOP, PHACO CHOP	7
CILIA FORCEPS, BARRAQUER CILIA FORCEPS	20
CLEAR CORNEA, DIAMOND KNIFE "CLEAR CORNEA"	31
COLIBRI, COLIBRI FORCEPS	22
COLLAR BUTTON, COLLAR BUTTON HOOK	6
CONNECTOR, MALE-MALE CONNECTOR	14
CORCELLE, CORCELLE EYE SPECULUM	1
CORNIC, CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS	12
CORNIC, CORNIC FORCEPS	23
CORNIC, CORNIC NEEDLE HOLDE	27
CORNIC, CORNIC NUCLEUS VECTIS	5
CORYDON, CORYDON FORCEPS	19
CULLER, CULLER IRIS SPATULA	5
CURETTE, J.A. BERNARD LACRIMAL CURETTE	4
CURETTE, MEYERHOFFER CHALAZION CURETTE	4

D

DESMARRS, DESMARRS CHALAZION FORCEPS	20
DESMARRS, DESMARRS LID RETRACTOR	2

DIAMOND KNIFE, 3 STEPS DIAMOND KNIFE	31
DIAMOND KNIFE, DIAMOND KNIFE "CLEAR CORNEA"	31
DIAMOND KNIFE, DIAMOND KNIFE "SCLERAL POCKET"	31
DIAMOND KNIFE, RK DIAMOND MICROMETER KNIFE	31
DILATOR, DOUBLE END LACRIMAL DILATOR	29
DILATOR, SICHEL WILDER LACRIMAL DILATOR	29
DRESSING, DRESSING FORCEPS	20

E

ELSCHNIG, ELSCHNIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS	22
ENUCLEATION, ENUCLEATION SCISSORS	10
EVISCERATION SPOON	4

F

FINE, FINE FORCEPS	24
FOLDABLE LENS, GRASPING FOLDABLE LENS FORCEPS	24
FORCEPS, ADSON BROWN FORCEPS	20
FORCEPS, ADSON TISSUE FORCEPS	20
FORCEPS, ARON-ROSA II FORCEPS	24
FORCEPS, BARRAQUER CILIA FORCEPS	20
FORCEPS, BARRAQUER COLIBRI FORCEPS	23
FORCEPS, BONN FORCEPS	22,23
FORCEPS, CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS	23
FORCEPS, COLIBRI FORCEPS	22
FORCEPS, CORNIC FORCEPS	23
FORCEPS, CORYDON FORCEPS	19
FORCEPS, CURVED UTRATA FORCEPS	19
FORCEPS, DEMARRS CHALAZION FORCEPS	20
FORCEPS, DRESSING FORCEPS	20
FORCEPS, ELSCHNIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS	22
FORCEPS, FINE FORCEPS	24
FORCEPS, GRASPING FOLDABLE LENS FORCEPS	24
FORCEPS, GREEN FIXATION FORCEPS	22
FORCEPS, HALSTED MOSQUITO FORCEPS	21
FORCEPS, HARMS TUBINGEN FORCEPS	21
FORCEPS, KELMAN McPHERSON FORCEPS	19
FORCEPS, McDONALD FOLDABLE FORCEPS	24
FORCEPS, McDONALD II FOLDABLE FORCEPS	24
FORCEPS, MONOFILAMENT TYING FORCEPS	22
FORCEPS, PAUFIQUE FORCEPS	23
FORCEPS, PICK-UP AND FOLD FORCEPS	24
FORCEPS, TISSUE FORCEPS	20
FORCEPS, TROUTMAN TYING FORCEPS	21,22
FORCEPS, UTRATA FORCEPS	19
FOREIGN BODY SPUD	3

G

GALAND, GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS	12
GALEZOWSKI, GALEZOWSKI CANNULA	16
GALEZOWSKI, GALEZOWSKI LACRIMAL PROBE	29
GASS ROUCHY, GASS ROUCHY HOOK	5
GASTAUD, GASTAUD II CANNULA	17
GASTAUD, LONG GASTAUD III CANNULA	17
GASTAUD, MEDIUM GASTAUD CANNULA	17
GAUGE, HUCO KREMER BLADE GAUGE	31
GILLIES, GILLIES LID HOOK	6
GRAEFE, GRAEFE MUSCLE HOOK	5
GREEN, GREEN FIXATION FORCEPS	22
GUERIN, GUERIN CANNULA	14

H

HALSEY, HALSEY NEEDLE HOLDER	26
HALSTED, HALSTED MOSQUITO FORCEPS	21
HANDLE, KELLER CANNULA HANDLE	17
HANDLE, SHORT KELLER CANNULA HANDLE	17
HANDPIECE, FCI I/A HANDPIECE	18
HANDPIECE, UNIVERSAL I/A HANDPIECE	18
HARMS TUBINGEN, HARMS TUBINGEN FORCEPS	21
HEALON, HEALON CANNULA	15
HOFFER, HOFFER OPTIC ZONE MARKER	13
HOOK, ARRUGA HOOK	6
HOOK, BONN MICRO IRIS HOOK	6
HOOK, COLLAR BUTTON HOOK	6
HOOK, GASS ROUCHY HOOK	5
HOOK, GILLIES LID HOOK	6
HOOK, GRAEFE MUSCLE HOOK	5
HOOK, JAFFE BECHERT HOOK	7
HOOK, RETINAL DETACHMENT HOOK	5
HOOK, SINSKEY CORNIC HOOK	6
HOOK, SINSKEY HOOK	6
HUCO KREMER, HUCO KREMER BLADE GAUGE	31
HYDRO-DISSECTION, HYDRO-DISSECTION CANNULA	15

J

JÄGER, JÄGER LID PLATE	2
JAFFE BECHERT, JAFFE BECHERT HOOK	7

K

KATZIN, KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS	11
KELLER, KELLER CANNULA HANDLE	17
KELLER, SHORT KELLER CANNULA HANDLE	17
KELMAN McPHERSON, KELMAN McPHERSON FORCEPS	19
KERRISON, KERRISON BONE NIBBLING RONGEUR	30
KNAPP, KNAPP LACRIMAL RETRACTOR	30
KRATZ, KRATZ ABRASIVE CANNULA	16

L

LAFORGE CORNIC, LAFORGE CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS	12
LAFORGE THX, LAFORGE THX CANNULA	15
LEBUISSON, LEBUISSON MICRO MANIPULATOR	7
LESCURE GALAND, LESCURE GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS	12
LESTER, LESTER IOL MANIPULATOR	7
LID PLATE, JAEGER LID PLATE	2
LOOP, SNELLEN LENS LOOP	7

M

MANIPULATOR, ARNEODO MICRO MANIPULATOR	7
MANIPULATOR, LEBUISSON MICRO MANIPULATOR	7
MANIPULATOR, LESTER IOL MANIPULATOR	7
MARKER, HOFFER OPTIC ZONE MARKER	13
McDONALD, McDONALD FOLDABLE FORCEPS	24
McDONALD II, McDONALD II FOLDABLE FORCEPS	24
MEYERHOEFER, MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE	4
MONOFILAMENT, MONOFILAMENT TYING FORCEPS	22
MOSQUITO, HALSTED MOSQUITO FORCEPS	21

N

NEEDLE HOLDER, BARRAQUER NEEDLE HOLDER	26
NEEDLE HOLDER, BARRAQUER TROUTMAN NEEDLE HOLDER	26
NEEDLE HOLDER, CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER	25,26
NEEDLE HOLDER, CORNIC NEEDLE HOLDER	27
NEEDLE HOLDER, HALSEY NEEDLE HOLDER	26
NEEDLE HOLDER, NEEDLE HOLDER LARGE HANDLE	25

P

PARKER, PARKER BLADE # 11	3
PARKER, PARKER HANDLE # 3	3
PAUFIQUE, PAUFIQUE FORCEPS	23
PAUFIQUE, PAUFIQUE SCLEROTOME KNIFE	3
PEARCE, PEARCE IRRIGATING CANNULA	7
PHACO, WIRE SPECULUM FOR PHACO	1
PICK-UP AND FOLD, PICK-UP AND FOLD FORCEPS	24
PLEY, PLEY EYE SPECULUM	1
PROBE, GALEZOWSKI LACRIMAL PROBE	29

R

RAZOR BLADES	3
RETRACTOR, BONN RETRACTOR	2
RETRACTOR, DESMARRES LID RETRACTOR	2
RETRACTOR, KNAPP LACRIMAL RETRACTOR	30
RING, GLOBE FIXATION RING	13
RK, RK DIAMOND MICROMETER KNIFE	31
RONGEUR, KERRISON BONE NIBBLING RONGEUR	30
RYCROFT, RYCROFT AIR CANNULA	16

S

SALZ, SALZ NUCLEUS SPLITTER	24
SCISSORS, BARRAQUER IRIS SCISSORS	11
SCISSORS, BONN SCISSORS	9
SCISSORS, CASTROVIEJO SCISSORS	11
SCISSORS, CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS	12
SCISSORS, ENUCLEATION SCISSORS	10
SCISSORS, EYE SCISSORS	9
SCISSORS, GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS	12
SCISSORS, KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS	11
SCISSORS, LAFORGE CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS	12

SCISSORS, LESCURE GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS	12
SCISSORS, SEVRIN STEVENS TENOTOMY SCISSORS	10
SCISSORS, VANNAS IRIS SCISSORS	12
SCISSORS, VANNAS SCISSORS	12
SCISSORS, WECKER IRIS SCISSORS	10
SCISSORS, WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS	11
SCLERAL DEPRESSOR, SCLERAL DEPRESSOR AND FIXATION PICK	8
SCLERAL POCKET, DIAMOND KNIFE "SCLERAL POCKET"	31
SCLEROTOME, PAUFIQUE SCLEROTOME KNIFE	3
SERREFINE	21
SEVRIN STEVENS, SEVRIN STEVENS TENOTOMY SCISSORS	10
SICHEL WILDER, SICHEL WILDER LACRIMAL DILATOR	29
SIMCOE, ORIGINAL SIMCOE I/A CANNULA	15
SIMCOE, REVERSED SIMCOE I/A CANNULA	15
SIMCOE, SIMCOE CANNULA	13
SINSKEY, SINSKEY HOOK	6
SINSKEY CORNIC, SINSKEY CORNIC HOOK	6
SNELLEN, SNELLEN LENS LOOP	7
SPATULA, BARRAQUER SPATULA	5
SPATULA, CULLER IRIS SPATULA	5
SPECULUM, BARRAQUER WIRE SPECULUM	1
SPECULUM, CASTROVIEJO EYE SPECULUM	2
SPECULUM, CORCELLE EYE SPECULUM	1
SPECULUM, PLEY EYE SPECULUM	1
SPECULUM, WIRE SPECULUM FOR PHACO	1
SPLITTER, SALZ NUCLEUS SPLITTER	24
SPOON, EVISCERATION SPOON	4
SPUD, FOREIGN BODY SPUD	3
STERILIZING TRAYS	28
SYRINGE	8

T

TEYSSIER, TEYSSIER NUCLEUS BISECTOR	5
THX, THX ABRASIVE CANNULA	16
THX, THX CLUB DE GOLF I/A CANNULA	15
THX, THX I/A CANNULA	14
THX TEYSSIER, THX TEYSSIER I/A CANNULA	14
THX TURUT, THX TURUT I/A CANNULA	14
TIP, 45° ANGLED INTERCHANGEABLE TIP	18
TIP, 45° ANGLED TIP	18
TIP, 90° ANGLED INTERCHANGEABLE TIP	18
TIP, 90° ANGLED TIP	18
TIP, BINKHORST INTERCHANGEABLE TIP	18
TIP, BINKHORST TIP	18
TIP, CURVED INTERCHANGEABLE TIP	18
TIP, STRAIGHT INTERCHANGEABLE TIP	18
TIP, STRAIGHT TIP	18
TISSUE, ADSON TISSUE FORCEPS	20
TISSUE, TISSUE FORCEPS	20
TOWEL CLAMP	21
TRAYS, STERILIZING TRAYS	28
TREPHINE, TREPHINE FCI TYP	4
TROUTMAN, BLADE BREAKER AND HOLDER	3
TROUTMAN, TROUTMAN TYING FORCEPS	21,22
TUBING, SILICONE TUBING	15

U

UNIVERSAL EYE SHIELD	8
UTRATA, CURVED UTRATA FORCEPS	19
UTRATA, UTRATA FORCEPS	19

V

VANNAS, VANNAS SCISSORS	12
VANNAS, VANNAS IRIS SCISSORS	12
VECTIS, CORNIC NUCLEUS VECTIS	5

W

WECKER, WECKER IRIS SCISSORS	10
WESTCOTT, WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS	11



20 - 22, RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS

TEL : +33 (0) 1 53 98 98 98 FAX : +33 (0) 1 53 98 98 99
E-mail : fci@fci.fr Web : <http://www.fci.fr>